

# 液体窒素冷却NMRプリアンプ

## LNA-4R3取扱説明書 版2012/6/20 北川 健太郎

### 使用方法

---

電源として、トランスタイプで、12～15Vのものを用意する。0.16Aのはずであるので、電流計が付いている方がよい。発熱が減るので12Vの方が良い。

入力と出力ともにSBDのクロスダイオードが付いているが、出力側は100mAまでであるので、入出力を間違えて使用しないこと。

入力は、整合がとれていれば300Wまでは安全である。それ以上、もしくは整合が外れる可能性が大きければ、外部の保護ダイオードまたはDuplexer等が必要。クロスダイオードが破損した場合、低温部ダイオード基板の交換が必要となる。

液体窒素容器に入れる際は、5分以上かけてゆっくり入れる。熱サイクルは好ましくないので、できるだけ冷やしたままでいること。

電源を入れたまま温度を上げると、溶けた水分により破損する可能性がある。

SMAコネクタが緩みやすいので、たまに締め直すこと。

### TIPS

---

一般のDuplexerを使用した場合、0.3dB程度の損失があり、雑音指数がそれだけ悪化する。太くてシールドの良い $\lambda/4$ ラインの使用を推奨する。

入りに伝送線路的トランスを追加し、1:4のインピーダンス変換を行うと10MHz以下のNFを改善することが出来る。

入力雑音（外部ノイズ+コイル熱雑音）が大きい状態では、プリアンプの性能による差はあまりない。

### NMR実験時の簡易動作チェック

---

コイルが極低温状態で、外部ノイズが十分に小さく、整合もとれているとする。

プローブに繋いだ状態でのホワイトノイズと、プリアンプ入りにターミネータを繋いだ状態でのホワイトノイズを比較し、後者が5dB以上大きければ受信系は概ね正常である。

### ネットワークアナライザーでの動作チェック

---

添付資料の用に、低温時で37dB程度、常温でも35dB以上のゲインであれば正常である。


入力が-40dBm以下でないと正確に測定できないので、そのように設定するか、アッテネーターを加えること。

### トラブル時のDMMでの簡易動作チェック

---

電源OFFで、信号入力のSMAをダイオードレンジで測定し、0.2V程度であることを確認する。

0.15Vより小さければ、保護ダイオードが破損している。

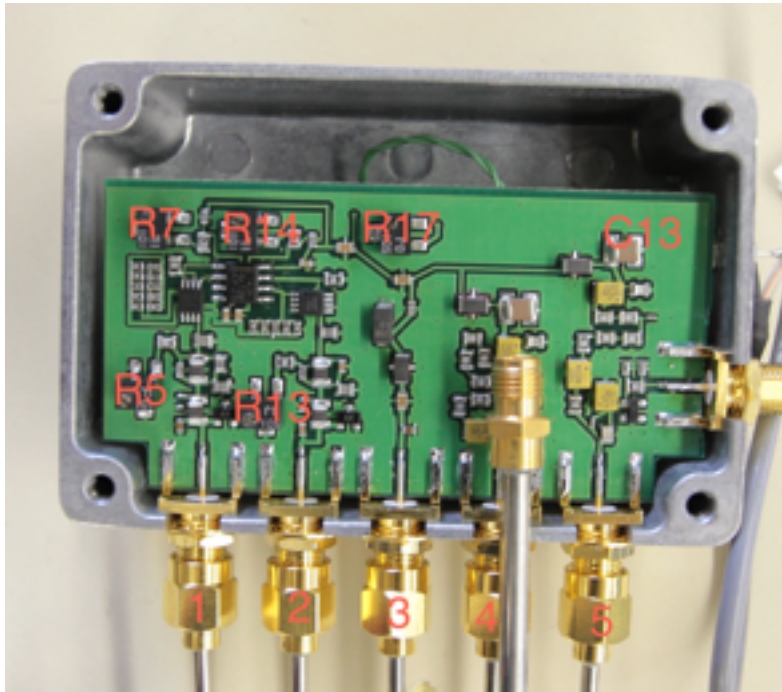

## 室温の場合

調整作業は25°C付近で行う。

一番右上のコンデンサの電圧で、内部電源電圧が9.50VになるようにR17を調整する。

3番ピンが $2.57 \pm 0.1V$ であることを確認する。

R7を回し、4番ピンが2.82Vになるように調整する。

1番ピンが $0.337 \pm 0.02V$ であることを確認する。

R14を回し、5番ピンが2.08Vになるように調整する。

2番ピンが $0.365 \pm 0.02V$ であることを確認する。

電源電流は $0.16 \pm 0.1A$ のはずである。

## 77 Kの場合

一番右上のコンデンサの電圧で、内部電源電圧が9.50VになるようにR17を調整する。

3番ピンが $2.57 \pm 0.1V$ であることを確認する。

R7を回し、4番ピンが2.94Vになるように調整する。

1番ピンが $0.285 \pm 0.02V$ であることを確認する。

R14を回し、5番ピンが2.21Vになるように調整する。

2番ピンが $0.296 \pm 0.02V$ であることを確認する。

電源電流は $0.16 \pm 0.1A$ のはずである。

NF測定によりさらに微調整すれば言うことはない。

## 付録1：低温法による雑音指数（NF）の測定

雑音指数NFは、アンプ入力前後のS/Nの悪化度合い、 $(S/N)_{in} / (S/N)_{out}$ 、で定義される。

通常は、入力雑音として290 Kの熱雑音 ( $k_B T = -173.98 \text{ dBm/Hz}$ ) を基準とする。

2種類の既知のノイズソース、異なる温度の熱雑音を用いて出力ノイズ強度を測定すれば、アンプのNFを決定することができる。

$$N_{out}(T) = \text{Gain} \times k_B T + N_{amp}$$

であるから、

$$N_{\text{amp}} / \text{Gain} = (T_2 \times N_{\text{out}}(T_1) - T_1 \times N_{\text{out}}(T_2)) / (N_{\text{out}}(T_2) - N_{\text{out}}(T_1))$$

となり、以下の式よりNFが求まる。

$$\begin{aligned} \text{NF} &= (S/N)_{\text{in}} / (S/N)_{\text{out}} = (S / k_B \times 290 \text{ K}) / (\text{Gain} \times S / (\text{Gain} \times k_B \times 290 \text{ K} + N_{\text{amp}})) \\ &= 1 + N_{\text{amp}} / (\text{Gain} \times k_B \times 290 \text{ K}) \end{aligned}$$

dB表示では、 $10 \log_{10}(1 + N_{\text{amp}} / (\text{Gain} \times k_B \times 290 \text{ K}))$ である。

室温と液体窒素温度でのターミネータを利用し、雑音強度はスペクトラムアナライザーを用いて測定することで求めることが出来るが、レベルが小さいので工夫が必要である。

まず、入力はセミリジッド／セミフレキ同軸のみでフルシールドする必要がある。


スペクトラムアナライザーの設定は、ゼロスパン、アッテネーターOFF、RBWを0.1MHz程度以下、VBWを最小に、アベレージ機能、ノイズマーカーを使用する。また、スペクトラムアナライザー自身のノイズを別途測定し差し引くか、プリアンプを追加する必要がある。

## 付録 2： 先行試作機の液体窒素温度での特性

デッドタイムは $2 \mu\text{s}$ 以下

リターンロスは8dB程度

ゲイン @-40dBm

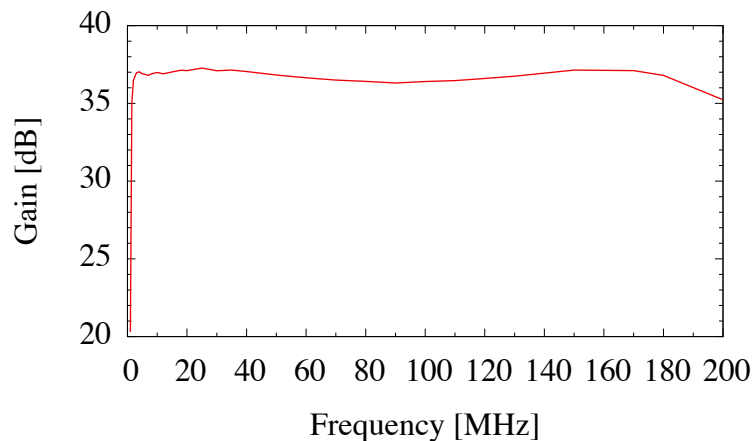

雑音指数

